



项目名称	果糖、蔗糖、葡萄糖、山梨醇		报告编号	OTZJ260427001
参考标准	客户标准			
样品描述	溶液			
检测要求	满足含量测定检测要求			
色 谱 柱	Excsep™ SAC NH2, 4.6×250mm, 5μm			
流 动 相	乙腈-水 等度洗脱			
检 测 器	示差折光检测器 40℃		柱 温	40℃
流 速	0.8mL/min		进 样 量	10μL

混标溶液色谱图：

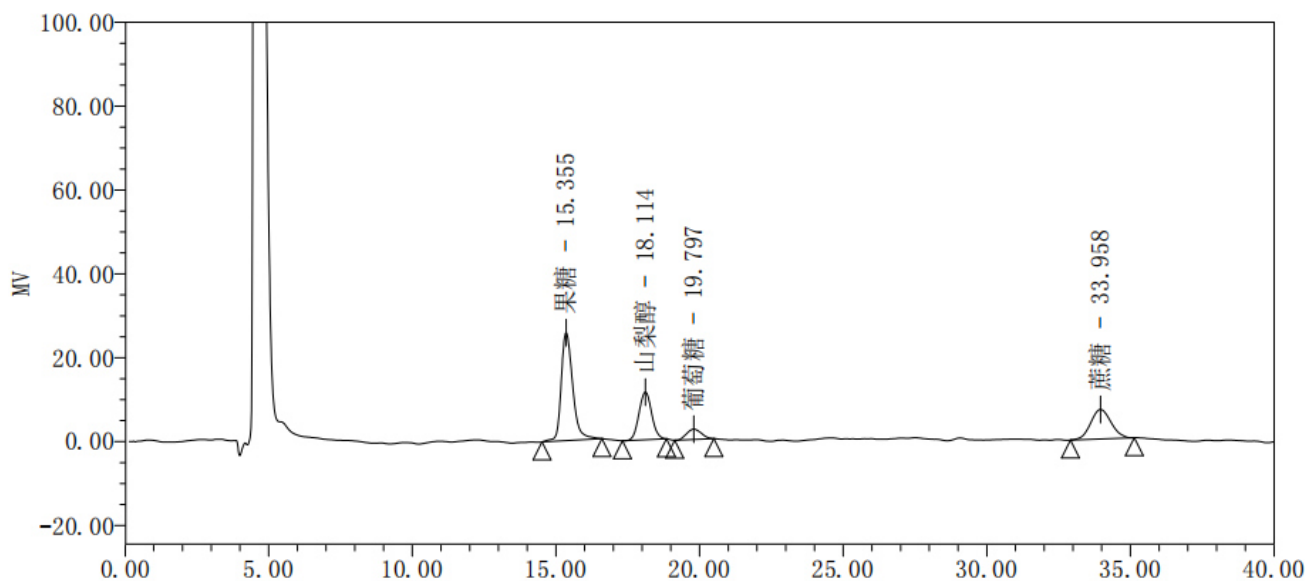

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	果糖	15.355		1.265	7779
2	山梨醇	18.114	3.628	1.027	8103
3	葡萄糖	19.797	1.870	1.073	6385
4	蔗糖	33.958	12.239	1.037	10800

样品溶液色谱图:

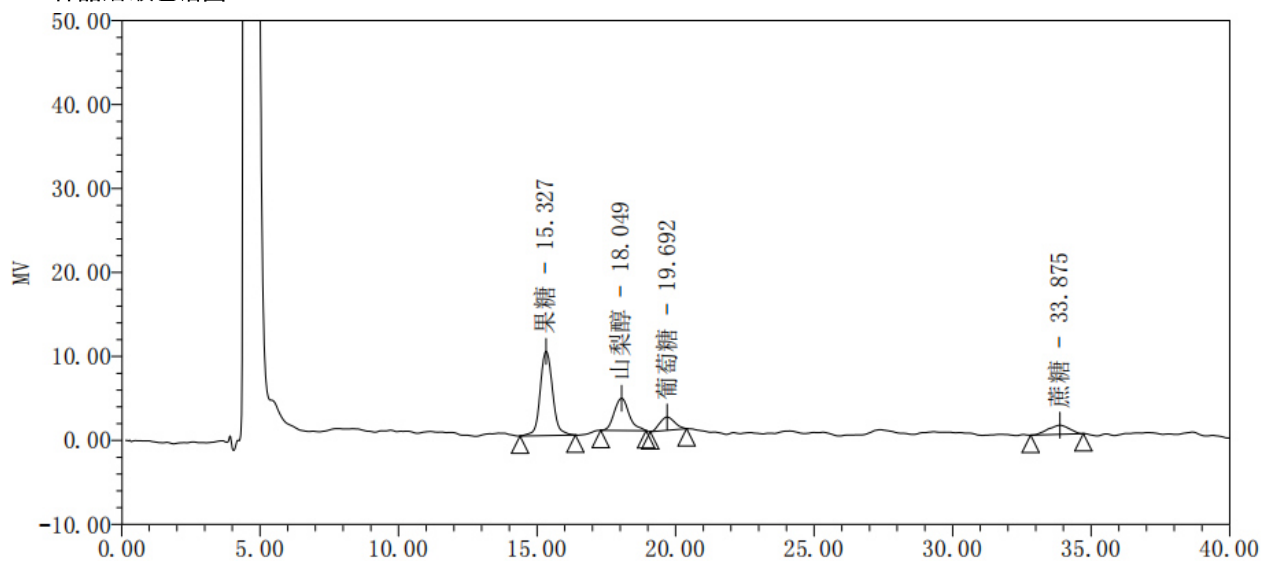

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	果糖	15.327		1.085	6229
2	山梨醇	18.049	3.106	1.211	5630
3	葡萄糖	19.692	1.645	1.109	5786
4	蔗糖	33.875	11.175	0.885	7366