



项目名称	甜叶菊中绿原酸总酸	报告编号	OTJH260317002
参考标准	客户方法		
样品描述	供试品和对照品溶液		
检测要求	满足检测要求		
色 谱 柱	Excsep™ PT, 4.6×250mm, 5μm		
流 动 相	流动相 A: 0.1%磷酸 流动相 B: 乙腈 梯度洗脱		
检 测 器	UV 327nm	柱 温	35°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	5 μL

对照品溶液色谱图:

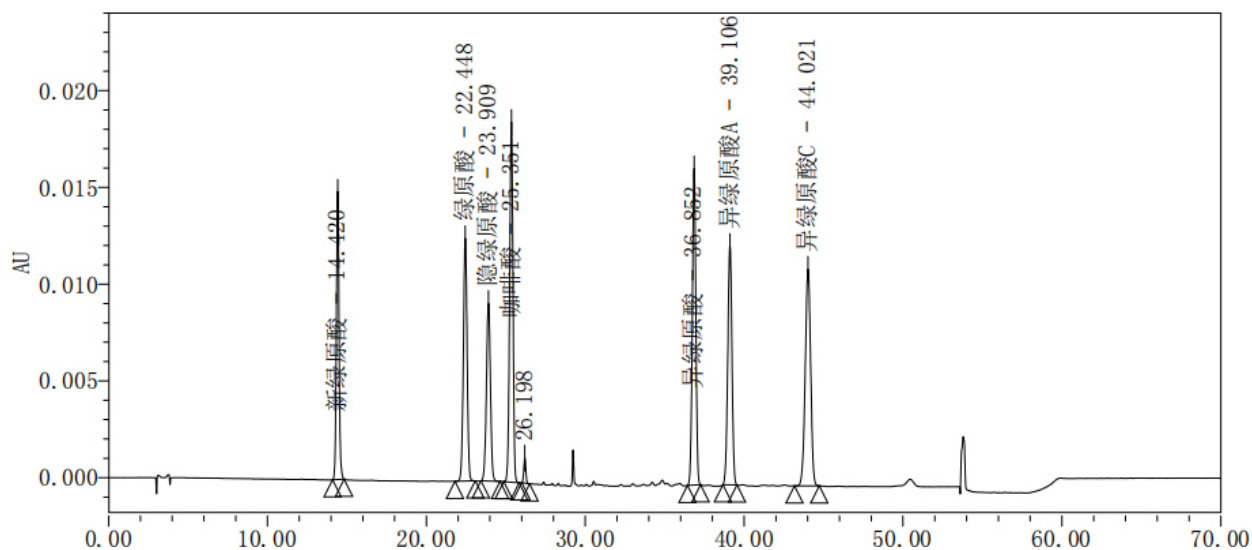

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	新绿原酸	14.420		1.045	35844
2	绿原酸	22.448	21.561	0.984	44375
3	隐绿原酸	23.909	3.226	0.982	42739
4	咖啡酸	25.351	3.351	0.952	70481
5		26.198	2.646	1.001	17991
6	异绿原酸	36.852	32.075	0.973	131443
7	异绿原酸 A	39.106	4.992	0.967	105365
8	异绿原酸 C	44.021	8.731	0.958	79466

样品溶液色谱图:

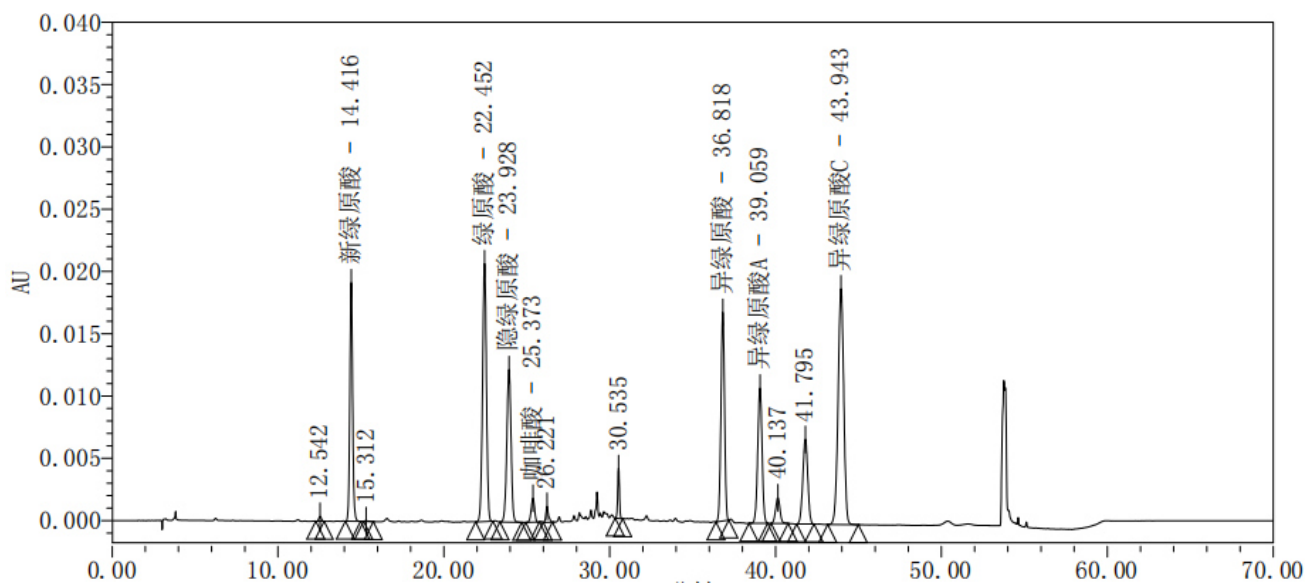

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		12.542		1.026	31643
2	新绿原酸	14.416	6.240	1.042	35679
3		15.312	2.438	1.922	37104
4	绿原酸	22.452	16.670	0.977	44182
5	隐绿原酸	23.928	3.239	0.973	41957
6	咖啡酸	25.373	3.367	0.923	72617
7		26.221	2.535	1.313	151497
8		30.535	17.729	0.988	389898
9	异绿原酸	36.818	20.704	0.962	134599
10	异绿原酸 A	39.059	4.993	0.976	105590
11		40.137	2.186	0.998	108054
12		41.795	3.125	0.976	90095
13	异绿原酸 C	43.943	3.580	0.962	79140