



项目名称	芋螺肽及芋螺环肽含量测定	报告编号	OTJH251106001R
参考标准	客户方法		
样品描述	芋螺肽标准品溶液、供试品溶液		
检测要求	满足芋螺肽及芋螺环肽含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® 300 C18 4.6×150mm,5µm		
流动相	流动相 A: 0.1%三氟乙酸水溶液 流动相 B: 0.1%三氟乙酸乙腈溶液, 按梯度洗脱		
检测器	UV 220nm	柱 温	40°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10µL

芋螺肽标准品溶液色谱图:

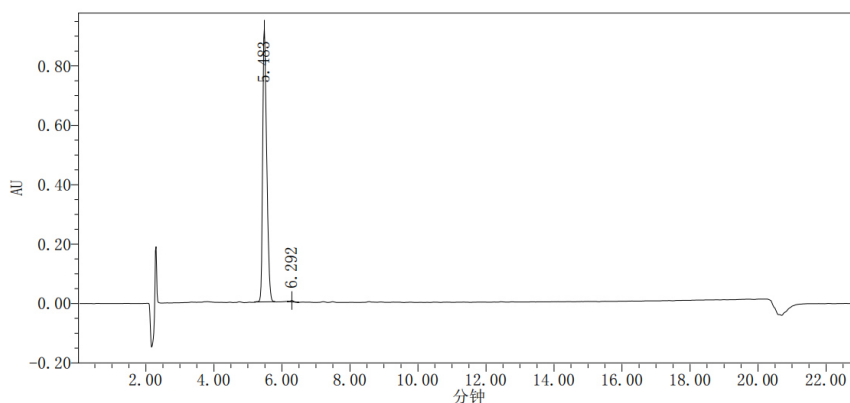

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		5.483	/	1.32	9499
2		6.292	3.86	1.20	18824

供试品溶液色谱图:

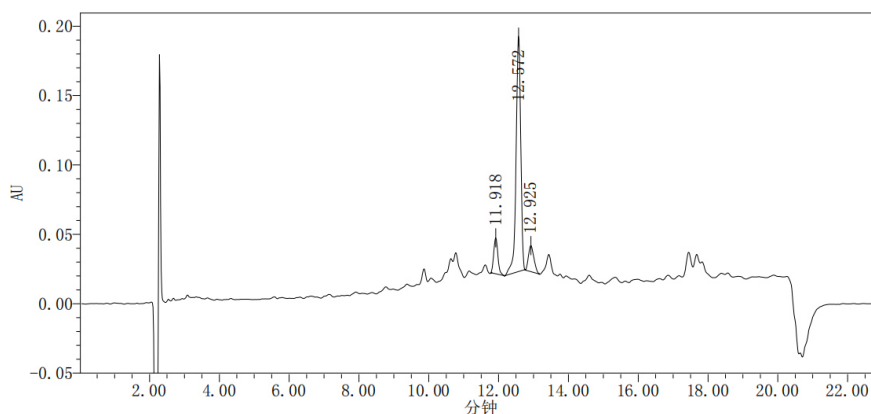

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		11.918	/	1.25	47581
2		12.572	2.83	0.84	44685
3		12.925	1.28	1.22	29491