


项目名称	生育酚、VD3、前 VD3 的含量	报告编号	OTJH251118002R
参考标准	客户方法		
样品描述	分离度溶液		
检测要求	满足生育酚、VD3、前 VD3 的含量检测要求		
色谱柱	Excsep® NH2 4.6×250mm,5μm		
流动相	正己烷-异丙醇=99125-875		
检测器	UV 265nm	柱 温	40°C
流 速	1.2mL/min	进 样 量	100μL

分离度溶液色谱图：

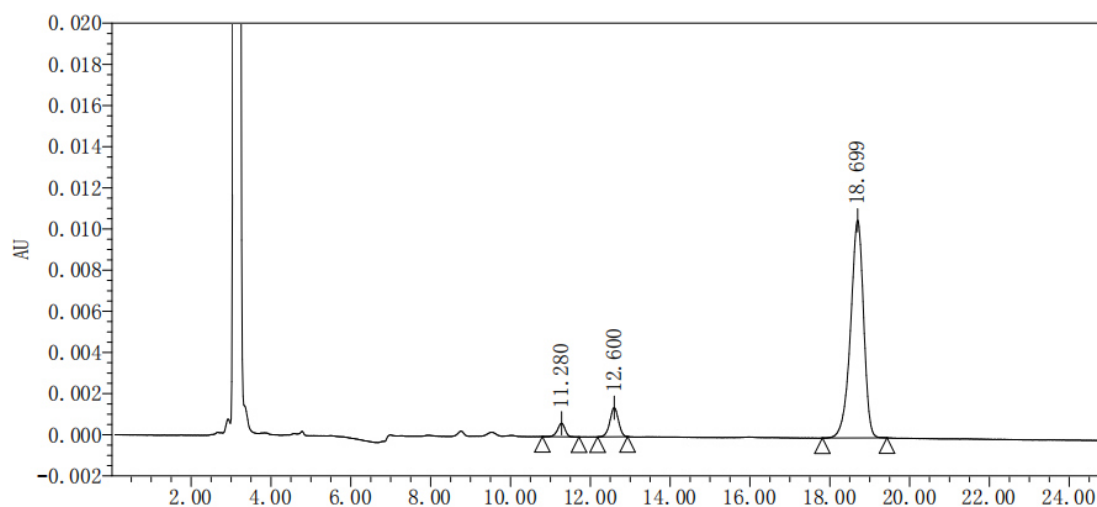

	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		11.280	/	0.92	17269
2		12.600	3.47	0.97	15891
3		18.699	12.01	0.88	16031